



rea

Confidence in posture solutions

rea

Clematis[®]

Qualité et confort reconnus



Yes, you can.

Chez Invacare, nous comprenons que chaque individu est différent et que les utilisateurs ont des besoins spécifiques lorsqu'il s'agit de choisir leur fauteuil. Nous comprenons également que les institutions (EHPAD) attendent de leurs fauteuils qu'ils soient réglables, notamment en largeur au niveau des accoudoirs et des repose-jambes. Dans le but d'offrir une posture et un équilibre optimal, nous savons qu'une inclinaison d'assise est essentielle.

Le *Rea Clematis* est la réponse à toutes ces attentes ! Ses multiples réglages, son design, sa fiabilité et les bénéfices qu'il apporte à l'utilisateur en font un fauteuil connu et reconnu.

Assise multiréglable

La version du *Clematis* Stock profite en série d'un réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes. Ce réglage qui s'effectue sans outil grâce à des manettes indéchables, et qui s'ajoute au réglage de la profondeur d'assise, permet d'ajuster rapidement l'assise aux dimensions de l'utilisateur.

Inclinaison à compensation

La conception de ce fauteuil avec le point de pivot du siège sous le bassin et le point de pivot des repose-jambes au niveau de celui des genoux permet de conserver une posture optimale de la personne. L'inclinaison d'assise permet de faire varier les points de pression du corps et favorise ainsi la prévention des escarres.



Caractéristiques et Options



Réglages de l'assise en largeur

Permet d'augmenter la largeur entre accoudoirs de + 40 mm et la largeur entre repose-jambes de + 100mm.



Alber viaplus

Assistance à la poussée conçue pour le *Rea Clematis*. La tierce personne n'aura plus d'efforts à fournir pour pousser le fauteuil.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

<i>Rea Clematis</i>	390/440/490 ¹ / 390-430 / 440-480 / 490-530 mm	420 - 480 mm	400 - 450 mm	600 - 710 mm	230 - 340 mm	330 - 500 mm	-1° à +19°	Largeur d'assise + 210 mm
<i>Rea Clematis</i>	960 -1120 mm	1120 -1480 mm	-1° à + 30°	125 kg	20,5 / 21 / 21,5 ²	30 / 32 / 33,5 kg		

- Rea Clematis* largeur fixe
- Poids sans appui-nuque, sans accoudoirs, sans coussin, sans repose-jambes, sans cale-tronc, sans roues arrière.
- Largeur 390 (h 595 x L 840 X 585 mm), Largeur 440 (h 595 x L 840 X 635 mm), Largeur 490 (h 595 x L 840 X 685 mm)


Coloris du châssis

Gris perle



Revêtement du siège

Dartex noir TR26

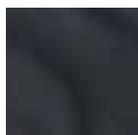

Crash testé ISO 7176-19

